


# JAK PRAWIDŁOWO

## WYKONAĆ POMIAR GLUKOZY PRZY UŻYCIU GLUKOMETRU?

1. Włóż lancet do nakłuwacza.
2. Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i wysusz je.
3. Włóż pasek do komory glukometru.  
**UWAGA! Nie wolno nakładać kropli krwi na pasek przed włożeniem paska do komory.**
4. Wymasuj, a następnie nakłuj bok opuszki palca. Nie wyciskaj krwi, ma ona wypłynąć samoczynnie.
5. Przyłóż glukometr z paskiem testowym do kropli krwi i odczytaj wynik.

## KOMPLEKSOWE SPOJRZENIE NA PACJENTA Z CUKRYCĄ

BEZPŁATNA APLIKACJA MOBILNA

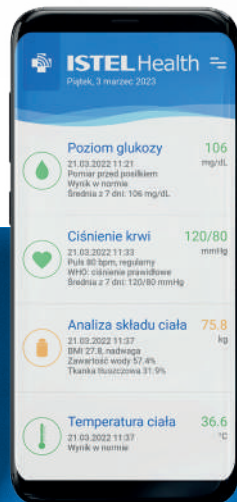

## POMIARY Z WIELU URZĄDZEŃ W JEDNYM MIEJSCU



POMIAR  
GLUKOZY



CIŚNIENIE  
KRWI



ANALIZA SKŁADU  
CIAŁA



TEMPERATURA  
CIAŁA



BADANIE  
EKG

# PACJENCIE, PAMIĘTAJ

## O PRZESTRZEGANIU PONIŻSZYCH ZASAD:

1. Na każdym opakowaniu pasków testowych znajduje się data ważności. Producent nie rekomenduje używania pasków po tym terminie.
2. Paski testowe należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia. Po upływie tego czasu nie należy z nich korzystać.
3. Nie przechowuj pasków poza opakowaniem, np. w portfelu.
4. Po każdym użyciu pasków testowych opakowanie należy niezwłocznie szczelnie zamknąć.
5. Opakowania pasków testowych należy przechowywać w miejscu, które nie jest narażone na skrajne temperatury. Miejsca **niewskazane**, to: lodówka, parapet okienny, okolice kaloryfera i piekarnika, samochód podczas mrozów lub upałów.
6. Należy korzystać tylko z jednego glukometru. **Nie zaleca się porównywania pomiarów wykonanych różnymi glukometrami.**
7. Zawsze wymieniaj lancety w nakłuwaczu. Są jednorazowego użytku.
8. Z jednego nakłuwacza nie mogą korzystać inne osoby! Także członkowie najbliższej rodziny.